


# Corexyl

# Kullanım Kılavuzu

Ağız Duşu  
Corexyl FL01

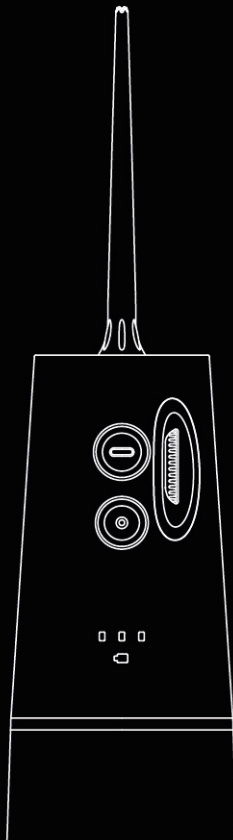

IPX7

CE

FC



# Güvenlik Önlemleri

Elektrikli cihazların kullanımında, özellikle ortamda çocuklar varsa, temel güvenlik önlemleri uygulanmalıdır.

## KULLANIM ÖNCESİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ

### TEHLİKE



Elektrik maruziyetini engellemek için;

1. Cihazı bu kılavuzda belirtilenlerden farklı bir şekilde kullanmayınız.
2. Cihazın zarar görmemesi için cihazı demonte etmeyin veya parçalarını değiştirmeyin.
3. USB kablosunu ilk kullanımda ve sonrasında her kullanım öncesi hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz..
4. Sadece üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanınız.
5. Sadece temiz su veya önerilen sıvıları kullanınız
6. USB kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz
7. Cihazı ateşe veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın
8. Kullanılmıyorsa şarj takılı bırakmayın
9. Tam şarj sonrası şarj kablosundan ayırın.
10. Cihazı su veya farklı bir sıvı içine batırmayın.
11. Şarj takılı iken tamamen su içine düşen cihaza dokunmayın. Derhal şarjdan ayırın.

## UYARILAR

1. Cihazı oral temizlik haricinde farklı bir amaçla kullanmayın.
2. Cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
  - Cihazı, şarj kablosu hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa veya hasar gördüyse kullanmayın.
  - Cihazın, çocukların bulunduğu ortamlarda kullanımı sırasında yakın denetim gereklidir.
  - Püskürtme uçlarının hava çıkışını bloke etmeyin veya yastık ve yatak gibi yumuşak yüzeylere dayayarak çalıştırmayın
  - Uykuluyken kullanmayın.
  - Basınçlı suyu göz, kulak, burun veya diğer hassas bölgelere sıkmayın.
  - Cihaz tarafından oluşturulan yüksek basınç bu hassas bölgelere zarar verebilir.
  - Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Cihazı sadece bu kılavuzda belirtilen şekilde ya da diş hekiminizce önerildiği gibi kullanınız.
  - Ağzınızda veya dilinizde yara varsa cihazı kullanmayınız.
  - Şarj kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
  - Su tankı içindeki hortumun ucuna veya diğer açık noktalara yabancı bir obje sokmayınız.
  - Su doldurmadan önce şarj kablosundan ayırınız.
3. Üretici tarafından farklı bir sıvı önerilmediği sürece sadece temiz su kullanın.
4. Güvenlik önlemi olarak şarj kablosu cihaza sadece tek yönde takılabilir. Kablo ucu cihaz şarj noktasına oturmuyorsa fişi ters çevirip tekrar deneyin. Yine de oturmazsa bir elektrikçiden yardım isteyin. Cihazı sökmeyin, hatayı gidermeye çalışmayın.

# Ürün Tanıtımı

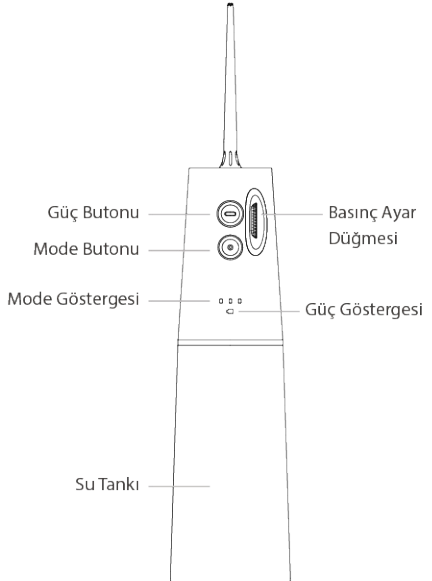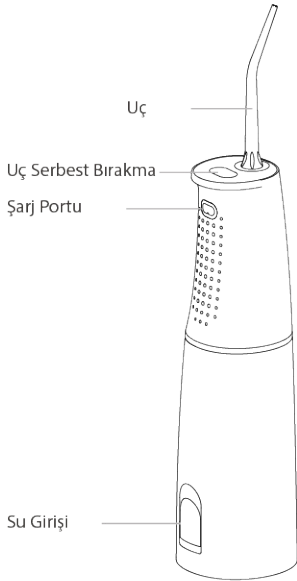

---


# Teknik Özellikler

<i>Model</i>	: FL01
<i>Güç</i>	: 5V
<i>Şarj Süresi</i>	: 2-4 <i>Saat</i>
<i>Tank Kapasitesi</i>	: 300 mL
<i>Basınç Aralığı</i>	: 20-140 psi
<i>Yüksek Basınç Su Atım Hızı</i>	: 1650 <i>atım/dakika</i>
<i>Çalışma Modu</i>	: D ( <i>Basınç Ayarlı</i> ) S ( <i>Güçlü</i> ) P ( <i>Diş Eti Masajı</i> )
<i>Pil Kapasitesi</i>	: 2000 mAh
<i>Tek Şarj ile Pil Ömrü</i>	: <i>Maks. 30 Gün</i>
<i>Garanti</i>	: <i>1 Yıl</i>

---


## Kullanımı

1. Kullanmadan önce cihazın pilini tamamen şarj edin.
2. Kullanım başlangıcında (satın aldıktan hemen sonra veya 3 aydan fazla kullanılmadığında) veya cihazı kullanırken çalışması durursa, cihazı en az 3 saat şarj ettiğinizden emin olun.
3. Pil zayıfsa göstergenin kırmızıya dönmesi normaldir.
4. Pilin ömrünü uzatmak için yılda bir kez pilin tamamen serbest kullanılması önerilir.
5. Tam şarjlı olmasına rağmen çalışma süresi kısaliyorsa bunun nedeni pilin bitmiş olması olabilir. (Pilin beklenen ömrü 3 yıldır ancak kullanıma ve saklama koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.)

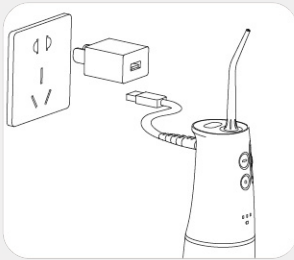

## a. Pili Şarj Etme


1. Cihazı kapatın.
2. Cihazı şarj istasyonuna bağlayın.
3. Güç göstergesinin yandığından emin olun.
4. Şarj adaptörünü elektrik prizine sıkıca takın.
5. Tamamen şarj olduğunda güç göstergesinin yanıp sönmeyeceği durur.

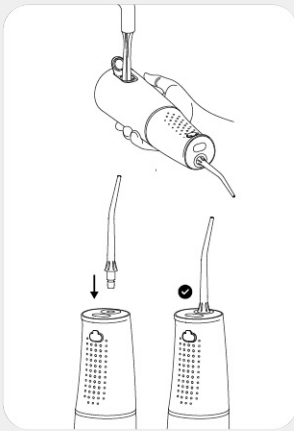

## b. Başlarken

1. Su deposu girişini açın ve suyla doldurun.
2. Su deposu girişinin kapalı olduğundan ve sıkıca bastırıldığından emin olun. Temiz su kullanın.
3. Tuz, diş macunu veya kimyasal maddeler dökmeyin.
4. Ucu yuvasına takın.
5. Tık sesi duyana kadar aşağıda doğru itin.

## Yıkamaya hazırlık ve uygulama modu seçimi

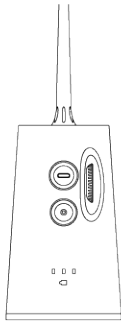

1. Su haznesine temiz su doldurun.Tam dolu su haznesi ile yaklaşık 120 saniye boyunca yıkama yapılabilir.
2. Hazne ve cihaz üzerindeki kırmızı oklar karşı karşıya gelecek şekilde hazneyi cihaz takın ve sola döndürerek kilitleyin.
3. Açma / Kapama düğmesine 2 saniye basılı tutun, cihaz devreye girer. Mode düğmesine basarak kendi isteğinize veya dış hekiminizin önerilerine göre uygun bir çalışma modu ve su basıncı seçin.
4. İsteddiğiniz zaman Açma / Kapama düğmesine basarak yıkamayı durdurun



### D Modu

Kullanıcının istediği su basıncını seçmesini sağlar.  
(20psi-140psi).




### S Modu

Diş yüzeydeki inatçı lekelerin etkin bir şekilde yüzeyden uzaklaştırılmasını sağlar.



### P Modu

Titreşim modu, diş etlerine masaj uygulanmasını sağlar.

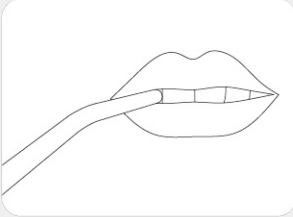

## d. Yıkama

1. Hafifçe lavaboya doğru eğilin ve püskürtme ucunu ağızda olacak şekilde tutun ve güç düğmesine basın.
2. Püskürtme ucunu dişlerinize doğru tutun.
3. Etrafa su sıçramasını engellemek için dudaklarınızı kapatın.


## e. Öneriler

1. Akışı dişlere veya dişler ile diş etleri arasındaki kenara mümkün olduğunca dik olarak yönlendirin.
2. Dişler boyunca yavaşça hareket edin.
3. Diş aralarına ve diş tellerinin çevresine ekstra özen gösterin.

## f. Otomatik Zamanlayıcı

1. Cihaz 120 saniye ye ayarlıdır. Süre dolduğunda otomatik olarak kapanacaktır.
2. Seçilen kullanım modu otomatik olarak hafızaya alınır.



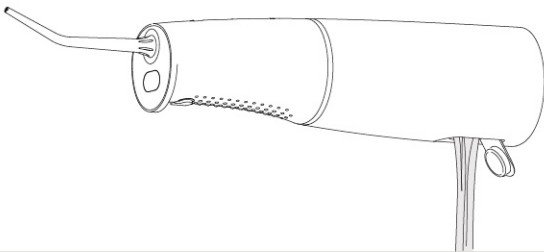


g.

## Kullanım Sonrası


1. Su haznesinde kalan suyu boşaltın ve hazneyi temiz su ile yıkayın.
2. Cihazı içindeki su bitinceye kadar 2 – 3 saniye çalıştırın.
3. Su haznesini bir miktar ılık su ile doldurun.
4. Cihazı tekrar çalıştırarak haznedeki su bitinceye kadar lavobaya akıtın. Bu sayede cihazınızı tıkanıklıklardan korur ve ömrünü uzatırsınız.
5. Başlık serbest bırakma düğmesine basarak püskürtme başlığını çıkartın. Temizleyip kaldırın.
6. Gerekliğinde yumuşak bir bez ve yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyici kullanarak cihazı temizleyin.
7. Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

# Farklı Uç Tipleri

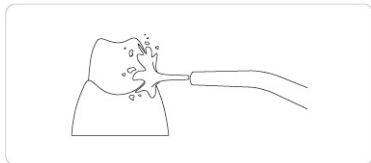


## Standart Uç

Dişlerin temizlenmesine yardımcı olur.

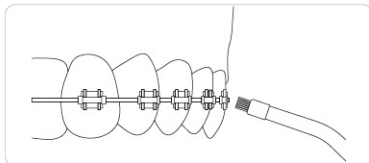

## Ortodontik Uç

Diş teli veya benzeri cihazlardan dolayı ulaşılması zor bölgelerin fırçalanmasına ve temizlenmesine yardımcı olur

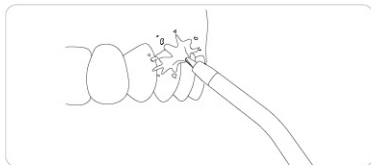

## Periodontal Uç

Periodontal doku alanlarının fırçalanmasına ve temizlenmesine yardımcı olur.



## Dil Temizleme Ucu

Pis kokuları uzaklaştırır ve nefes tazeliğini korur. Cihazı çalıştırın ve titreşim modunu (P) seçin. Dil temizleme başlığını yavaşça dilinizin ortasına veya orta çizgisine yerleştirin.

---

# Bakım

## Uçlar

1. Uç Serbest Bırakma düğmesine basarak ucu çıkartın.
2. Temiz su ile yıkayıp kurulayın.
3. Püskürtme uçlarının 6 ayda bir yenilenmesi önerilir. Eğer uçlar deforme olursa derhal değiştirin. Bozuk uçlar ağzınıza ve/veya cihaza zarar verebilir.

---

## Ana Unite

1. Sıvı sabunlu bir bez kullanarak kiri çıkarın ve kuru bir bezle silin.
2. Çok kirliyse suyla yıkayın. Daha sonra kurulayın.
3. 50°C'nin üzerindeki sıcak suyla yıkamayın.

---

## Su Tankı

1. Suyla yıkayın ve kuru bir bezle silin.
2. Kullanılmadığı zaman tankı kuru tutun. Temizlik için yalnızca hafif deterjan kullanın. Alkol veya aşındırıcı sıvılardan kaçınılmalıdır.

---

# Cihaz Servisi

Ürün ve hizmet bilgileri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen [www.spckozmetik.com.tr](http://www.spckozmetik.com.tr) adresini ziyaret edin.

---

---

# Sorun Giderme

**?** Şarj edildikten sonra bile yalnızca birkaç dakika çalışıyorsa;

Pil bitti.

— Cihazı 3 saatten fazla sürekli olarak şarj edin

Pil bitmedi.

— Destek için bizimle iletişime geçin.

**?** Su basıncı çok düşük ise;

Uç içine kir sıkışmış veya uç deforme olmuş.

— Ucu değiştirin.

**?** Su gelmiyorsa;

Cihaz kullanım sırasında çok fazla eğilmiş.

— Cihazı mümkün olduğunca dik kullanın.

Uç içerisinde kir sıkışmış.

— Ucu değiştirin.

Uç düzgün takılmamış.

— Ucu çıkarın ve yeniden takın.

**?** Cihaz çalışmıyorsa;

Cihazı yeni satın aldınız veya 3 aydan uzun süre kullanılmadı.

— Cihazı en az 3 saat şarj edin.

---

# Yardıđ & Garanti Destegi

Or visit [www.spckozmetik.com.tr](http://www.spckozmetik.com.tr)

SPC Kozmetik Yazılım San. ve Tic. Ltd. Őti. (Türkiye Satıő Distribütörü)

Çiğdem Mah. Bahriye Sk. No 1/A 34800  
Beykoz / İstanbul

info@spckozmetik.com.tr  
www.spckozmetik.com.tr

**Corexyl**

Sađlıklı diř ve diř etleri iin kaliteli bir rndr.